Erba Lachema s.r.o.

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ


35_2025_Nestandardní vzhled Erba Thrombin Reagent 20

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že během výroby našeho produktu **Thrombin Reagent 20** (kat. č. EHL00006) jsme zjistili, že u malého počtu lyofilizovaných tablet nedošlo k vytvoření typické ploché, diskovité struktury. Místo toho tyto tablety vykazovaly vzhled ve tvaru prstence se zvýšeným okrajem – viz obrázek níže. Nemůžeme vyloučit možnost výskytu lahviček s odlišným vzhledem v uvedených šaržích.



Nestandardní vzhled

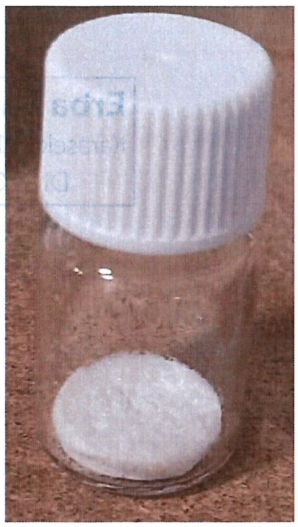

Normální vzhled

Name	Lot	Exp.
Erba Thrombin Reagent 20	2505182	2027-03
Erba Thrombin Reagent 20	2503135	2026-07
Erba Thrombin Reagent 20	2502189	2026-12
Erba Thrombin Reagent 20	2410074	2026-07
Erba Thrombin Reagent 20	2407062	2025-09
Erba Thrombin Reagent 20	2406145	2025-09
Erba Thrombin Reagent 20	2405025	2025-09
Erba Thrombin Reagent 20	2402095	2025-09

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika
IČ: 269 18 846, DIČ: CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com

Erba Lachema s.r.o.

Po otestování lahviček s nestandardním vzhledem bylo zjištěno, že obsahují vyšší množství vody, což může ovlivnit dobu použitelnosti.

Žádáme vás, abyste před rozpuštěním lyofilizátu zkontrolovali vzhled lahvičky. Pokud zaznamenáte výše uvedenou odchylku, prosíme, pořiďte fotografii lahvičky.

Pokud zjistíte, že lahvička s činidlem má nestandardní vzhled, nebo pokud kontrolní hodnoty neodpovídají specifikacím, doporučujeme použít novou lahvičku. Pokud vy nebo váš zákazník zaznamenáte některý z těchto problémů, neváhejte nás kontaktovat za účelem výměny.

Omlouváme se za případné komplikace, které vám tato situace mohla způsobit.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

V Brně, 18.06.2025

Ref. No.AN_35_2025